

TANDA

mē[™]soft

Μάθετε τα πάντα για το **must** της
μόνιμης μείωσης της τριχοφυΐας
στο στήτι σε **σώμα** και **πρόσωπο**

Τι είναι το mē soft;

Το mē είναι μια επανασταστική συσκευή που **συνδυάζει** ταυτόχρονα:

- τη θεραπεία για την μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας.
- την αποτρίχωση / το ξύρισμα

Ενσωματώνοντας τη τεχνολογία elōs, το mē προσφέρει την πιο **γρήγορη**, την πιο **αποτελεσματική** και την πιο **ασφαλή λύση**.

Τι σημαίνει elōs;

Η elōs είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας.

Αναπτύχθηκε από την Syneron, τον παγκόσμιο ηγέτη στον επαγγελματικό εξοπλισμό αισθητικής. Η τεχνολογία αυτή είναι η μόνη που συνδυάζει Έντονο Παλμικό Φως (IPL) με διπολικές Ραδιοσυχνότητες (RF) προσφέροντας την πιο αποτελεσματική και την πιο σίγουρη λύση στην αγορά.

Το έντονο παλμικό φως (IPL) παράγει ακριβή ποσότητα θερμότητας στην επιδερμίδα για την έναρξη μείωσης της ανάπτυξης της τρίχας ενώ ταυτόχρονα οι ραδιοσυχνότητες (RF) βοηθούν την κατεύθυνση του IPL στα βαθύτερα σημεία της επιδερμίδας.

Γιατί να επιλέξετε το mē soft;

Το πιο αποτελεσματικό


- Η πιο προηγμένη επαγγελματική τεχνολογία ειός: IPL+ραδιοσυχνότητες.
- Μέχρι και 94% μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας μετά από 7 εβδομαδιαίες συνεδρίες (μέσος όρος 61%).

Το πιο ασφαλές

- Το μόνο που είναι αποτελεσματικό για όλα τα χρώματα δέρματος και τρίχας.

Χρώμα δέρματος	 1	 2	 3	 4	 5	 6
Χρώμα τρίχας						

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε σώμα και πρόσωπο.

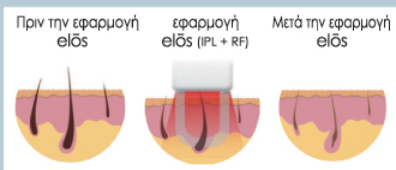

Το πιο γρήγορο

- Με την δυνατότητα συνεχούς εμπομπής παλμών γλιστρώντας τη στο δέρμα. Μία συνεδρία για πλήρες σώμα γίνεται μόνο σε 32 λεπτά, ενώ μία συνεδρία ποδιού γίνεται μόνο σε 10 λεπτά.

- Σύστημα 2 σε 1 που συνδυάζει την αποτρίχωση με την θεραπεία μείωσης της τριχοφυΐας.

Πολύ οικονομικό

- Διαθέτει κεφαλή 6000 παλμών

- Προσφέρει σειρά αξεσουάρ για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας : κεφαλή quartz 120000 παλμών, ξυριστική κεφαλή, αποτριχωτική κεφαλή, προσαρμογέας ακριβείας για δύσκολες περιοχές (διαθέσιμη από το φθινόπωρο του 2013).



Πώς λειτουργεί το mē soft;

1 - Θέστε σε λειτουργία το mē

2 - Επιλέξτε το επίπεδο ειός και ενεργοποιήστε τη συσκευή χειρός

3 - Εφαρμόστε τη συσκευή χειρός γλιστρώντας στη περιοχή που επιλέξατε

1 λεπτό



2 λεπτά



3 λεπτά



10 λεπτά

2 λεπτά



2 λεπτά

6 λεπτά

12 λεπτά



Πραγματοποιήστε για 7 εβδομάδες, μία συνεδρία ανά εβδομάδα και στη συνέχεια μία συνεδρία το μήνα, για 3 μήνες. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το mē όταν εμφανίζονται τρίχες. Για τρίχες ανοιχτού χρώματος (ξανθές, λευκές ή κόκκινες) είναι προτιμότερο να γίνεται συνδυασμός εφαρμογής με την αποτριχωτική κεφαλή. Μπορεί να χρειασθούν και συμπληρωματικές συνεδρίες.

TANDA

mēTMsoft



Νέο design

της συσκευής χειρός για
μεγαλύτερη άνεση στη χρήση

Υψηλής ποιότητας

επαγγελματική κατασκευή

Λειτουργία με πλήκτρα αφής

που απλοποιούν την χρήση

Με νέο λογισμικό

για μείωση της θερμότητας,
για μεγαλύτερη ασφάλεια και
ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα
λειτουργίας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Χρειάζεται προετοιμασία πριν κάθε συνεδρία;

Δεν είναι απαραίτητο! Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του mē είναι η λειτουργία του "όλα σε ένα" αν επιλέξετε τη χρήση της αποτριχωτικής κεφαλής, ως αξεσουάρ. Όταν το mē γλυστρά στο δέρμα η τρίχα αφαιρείται από την αποτριχωτική κεφαλή και η ανάπτυξή της σταματά με την θεραπεία eīōs.

Πότε θα δω αποτελέσματα;

Για τη διασφάλιση αποτελεσμάτων μόνιμης αποτρίχωσης πρέπει να ακολουθήσετε το συνιστώμενο πλήρες πρωτόκολο των 7 συνεδριών, με διαστήματα μίας εβδομάδας μεταξύ των συνεδριών και στην συνέχεια μία συνεδρία κάθε μήνα για διάστημα 3 μηνών ακολουθώντας τις συνιστώμενες χρονικές διάρκειες εφαρμογής σε κάθε περιοχή του σώματος (βλ. οδηγίες χρήσης).

Είναι ασφαλές;

Το mē είναι το πιο ασφαλές σύστημα μόνιμης μείωσης της τριχοφυΐας στο στίπι. Η τεχνολογία eīōs είναι η μόνη που συνδυάζει την ισχύ των ενεργειών IPL και RF. Το παλμικό φως IPL προθερμαίνει ελαφρά τον θύλακα της τρίχας και στη συνέχεια τα κύματα των διπολικών ραδιοσυχνοτήτων συνεχίζουν την δράση σε βάθος αποφεύγοντας την αίσθηση υπερθέρμανσης που προκαλείται από άλλες συσκευές IPL. Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία eīōs το mē είναι κατάλληλο για όλα τα χρώματα δέρματος, ακόμη και τα πιο σκούρα και για όλα τα χρώματα τρίχας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το mē οπουδήποτε στο σώμα μου;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το mē σχεδόν σε όλα τα μέρη του σώματος: πόδια, χέρια, μπικίνι, μασχάλες, θώρακας και πρόσωπο (βλ. τους περιορισμούς στις οδηγίες χρήσης).

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το mē στο πρόσωπο;

Το mē μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο με τους προστατευτικούς φακούς για τα μάτια που συνοδεύουν την συσκευή. Ένας προσαρμογέας για εφαρμογή ακριβείας θα είναι διαθέσιμος σαν αξεσουάρ το φθινόπωρο του 2013.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής του mē;

Η κεφαλή elōs που παρέχεται με την συσκευή Tanda mē είναι φορτισμένη με 6000 παλμούς. Αν επιθυμείτε μπορείτε να αγοράσετε νέα κεφαλή elōs για να επεκτείνετε την διάρκεια ζωής της συσκευής σας.

www.tanda.gr.com



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

KARANT A.B.E.E. , Φαλήρου 5,

185 43 Πειραιάς - Τηλ. : 210 4212360-70

Email: info@carad.gr - www.carad.gr